



Piękno rodzinnej tradycji
- innowacja w każdym detalu



Polski producent
URZĄDZEŃ KOSMETOLOGICZNYCH



Spis treści

O firmie	4
Paszport Criss	6
Mapa gabinetów	7
Serwis Criss	8
Gwarancja Criss	9
Urządzenia Criss	10
Zabiegi na urządzeniach Criss	12
Zastosowanie urządzeń Criss na problemy skórne	14
Criss RF Matrix PRO	16
Criss RF Matrix ULTRA	20
Criss Multi	24
Criss Hydro-Oxy	28
Criss Carbo-Oxy	32
Criss Hydroxy4	36
Criss S-Carbo	40
Criss Cool Laser 3F	44
Criss Hydro-Balance	48
Criss PressEMS	52
Szkolenia	60
Centrum Szkoleniowe Criss	62



AYCOM TWÓJ PARTNER W ŚWIECIE BEAUTY

Jesteśmy AYCOM, polską firmą rodzinną działającą od 1991 roku. Skupiamy się na dostarczaniu nowoczesnych urządzeń kosmetycznych dla sektora Beauty. W Criss tworzymy rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby profesjonalnych gabinetów i klinik estetycznych.

Nasza misja to dostarczanie specjalistom Beauty najwyższej klasy narzędzi, które nie tylko ułatwią codzienną pracę, ale przede wszystkim pozwolą na osiąganie spektakularnych efektów w pielęgnacji urody i zdrowia klientów. Zobowiązujemy się do kreowania produktów, które stoją na straży doskonałości i innowacji.

Rozumiejąc wagę rozwoju i edukacji w branży kosmetycznej, założyliśmy centrum szkoleniowe AYCOM Criss. Z niesłabnącą pasją i zaangażowaniem poświęcamy się podnoszeniu kwalifikacji specjalistów, oferując kursy i szkolenia, które są mostem do osiągnięcia profesjonalizmu i doskonałości. Wierzymy, że ciągła edukacja i doskonalenie umiejętności są fundamentem sukcesu i satysfakcji klientów.

Zapraszamy do świata AYCOM, gdzie innowacje harmonijnie łączą się z pięknem, tworząc niepowtarzalne doświadczenia i ustanawiając nowe standardy w branży kosmetycznej. Dążymy do tego, aby nasze produkty nie tylko spełniały oczekiwania najbardziej wymagających profesjonalistów, ale również były świadectwem naszego zobowiązania do jakości, skuteczności i piękna.



Paszport Criss

TWOJA DROGA DO WYJĄTKOWYCH KORZYŚCI

Zastanawiasz się, czym jest **Paszport Criss**? To Twoja brama do świata wyjątkowych przywilejów, rabatów i możliwości, które czekają na Ciebie w trakcie i po zakupie sprzętu Aycom Criss. Rozumiemy wyzwania, przed jakimi stajesz – zarówno te związane z prowadzeniem działalności, jak i te wynikające z dynamicznie zmieniającego się rynku. Dlatego stworzyliśmy Paszport Criss.

W obliczu rosnących kosztów i zmieniających się przepisów, Paszport Criss to odpowiedź na Twoje potrzeby. To nie tylko program lojalnościowy, ale przede wszystkim kompas, który wskaże Ci drogę przez różne etapy prowadzenia gabinetu.



Kosmetologu

TWOI KLIENCI CZEKAJĄ NA CIEBIE!

Dołącz do naszej **Mapy Gabinetów Criss** i podbij rynek kosmetyczny! Masz gabinet, w którym wykonujesz zabiegi na urządzeniach Criss? Chcesz przyciągnąć więcej klientów i zwiększyć widoczność swojego biznesu? To proste! Wystarczy, że dodasz swój gabinet na naszej Mapie Gabinetów Criss. Dzięki temu, nowi klienci łatwo Cię znajdą, a Ty zyskasz większy zasięg i więcej klientów!

Zapraszamy do odwiedzenia strony: <https://criss.pl/znajdz-gabinet/>

Nie czekaj, to idealna okazja, by rozwinąć swój biznes!

Serwis Criss

PROFESJONALIZM W KAŻDYM DETALU

Zakup urządzenia kosmetologicznego to nie tylko inwestycja w najnowszą technologię, ale także gwarancja, że otrzymasz wsparcie serwisowe na najwyższym poziomie. W Criss dbamy o każdy szczegół, aby zapewnić Ci spokojne użytkowanie naszych urządzeń. Nasz serwis jest dostępny zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz, gotowy sprostać wszelkim wyzwaniom.

Dlaczego warto skorzystać z naszego serwisu?

Szybka diagnoza: Nasz doświadczony zespół ekspertów błyskawicznie zidentyfikuje i rozwiąże każdy problem techniczny.

Oryginalne części zamienne: Korzystamy wyłącznie z oryginalnych części, co zapewnia długą żywotność oraz niezawodność Twoich urządzeń.

Dostępność: Nasz serwis telefoniczny jest dostępny 24/7, aby zapewnić Ci wsparcie o każdej porze dnia i nocy.

Transparentność: Zanim przystąpimy do naprawy, zawsze informujemy o przewidywanych kosztach i czasie realizacji, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad procesem.

Mobilność: Jeśli nie możesz dostarczyć urządzenia do naszego serwisu, oferujemy możliwość przestania go na nasz koszt (dotyczy urządzeń objętych gwarancją).



Gwarancja Criss

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

Standardowa gwarancja na nasze urządzenia wynosi 36 miesięcy, co już daje solidną ochronę, ale teraz możesz odpłatnie przedłużyć ją o kolejne 24 miesiące. Korzyści z przedłużonej gwarancji:

Długotrwałe bezpieczeństwo: Przedłużona gwarancja daje Ci pewność, że Twoje urządzenia są chronione nawet po zakończeniu standardowego 36-miesięcznego okresu gwarancyjnego.

Minimalizacja ryzyka: Inwestując w przedłużoną gwarancję, minimalizujesz potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi usterkami czy awariami.

Pełne zadowolenie z zakupu: Nasza oferta zapewnia spokój i pełne zadowolenie z zakupu, eliminując obawy związane z ewentualnymi problemami technicznymi.

Aby skorzystać z tej oferty, konieczne jest zakupienie przedłużenia gwarancji w trakcie aktywnego okresu obowiązującej gwarancji. Po jego zakończeniu możliwość przedłużenia nie będzie już dostępna.

Inwestycja w przedłużenie gwarancji to mądry wybór dla każdego, kto ceni sobie spokój i pewność, że jego urządzenia są w pełni chronione. Skorzystaj z tej wyjątkowej oferty, aby zapewnić sobie dłuższą ochronę na kolejne 24 miesiące.

Criss
URZĄDZENIA



Zabiegi jakie wykonasz NA URZĄDZENIACH CRISS

Urządzenia marki Criss to zaawansowane technologie, które oferują szeroki wachlarz zabiegów kosmetycznych, dostosowanych do różnych potrzeb skóry. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i precyzji działania, urządzenia Criss umożliwiają przeprowadzanie skutecznych i bezpiecznych zabiegów, które gwarantują widoczne efekty i zadowolenie klientów.



ZABIEGI

Oxybrazja			+	+		+		+
Infuzja telonowa			+	+		+		+
Masaż telnowy			+	+		+		+
Oczyszczanie wodorowe			+	+				
Abrazja	+		+	+				
Karboksyterapia			+			+		+
Radiofrekwencja mikroigłowa		+		+				
Radiofrekwencja monopolarna				+				
Masaż podciśnieniowy		+		+				
Epilacja								+
Elektrotymulacja EMS						+		
Presoterapia						+		
Podczerwień IR						+		

Zastosowanie urządzeń Criss NA PROBLEMY SKÓRNE

Urządzenia Criss to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnej i skutecznej pielęgnacji skóry. Niezależnie, czy chcesz zredukować zmarszczki, poprawić jędrność, czy oczyścić cerę – nasze technologie oferują szeroką gamę zabiegów dopasowanych do indywidualnych potrzeb skóry.



Criss Hydro-Balance

Criss RF Matrix PRO

Criss RF Matrix ULTRA

Criss Multi

Criss Hydro-Oxy

Criss PressEMS

Criss Carbo-Oxy

Criss Hydroxy4

Criss S-Carbo

Criss Cool Laser3F

ZASTOSOWANIE

Anti Age	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Przeciwzmarszczkowe	+	+	+	+	+		+	+	+
Rozstępy		+	+	+			+		+
Blizny		+	+	+			+		+
Trądzik	+			+	+		+	+	
Nawilżenie	+			+	+		+	+	
Odświeżenie	+			+	+		+	+	
Dotleniające	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Antyoksydacyjne				+	+				
Ujędrniające	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Zagęszczenie skóry		+	+	+	+	+	+	+	+
Seboregulacja	+			+	+		+	+	
Usuwanie owłosienia									+
Twarz	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ciało		+	+	+	+	+	+	+	+
Terapie łączone	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wzmacnianie mięśni						+			
Niwelowanie obrzęków	+		+			+			
Działanie rozluźniające						+			

Criss RF Matrix PRO

RADIOFREKWENCJA

MIKROIGŁOWA BIPOLARNA

I MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA



Criss RF Matrix PRO to przełomowe urządzenie w dziedzinie estetyki. Wykorzystując zaawansowaną technologię bipolarnej radiofrekwencji w połączeniu z mezoterapią mikroigłową. Criss RF Matrix PRO oferuje znakomite rezultaty w odmładzaniu, przebudowie oraz napięciu i zagęszczeniu skóry, już po pierwszym zastosowaniu.

Criss RF Matrix PRO to nowa wersja uznanego i najbardziej docenianego przez wielu specjalistów z branży urządzenia do radiofrekwencji mikroigłowej, któremu zaufało wielu kosmetologów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwijającego się rynku zwiększyliśmy funkcjonalność i wygląd urządzenia.

Urządzenie wyposażone jest w głowice do:

1A. Głowica do radiofrekwencji mikroigłowej: Głowica do zabiegu została wykonana z wysokiej jakości tworzywa, co zapewnia jej długą żywotność i trwałość. Jej ergonomiczny kształt sprawia, że użytkownik może ją pewnie i wygodnie trzymać w dłoni. Dostępne kartridże 25 i 64 igłowe z igłami izolowanymi lub nieizolowanymi umożliwiają pracę na różnych obszarach zabiegowych każdemu specjalście.

1B. Głowica do mezoterapii mikroigłowej*: Dzięki zastosowaniu tej samej głowicy umożliwiają tak samo precyzyjne parametry zabiegowe. Regulacje długości igieł (0,2mm-3,5mm) i czasu nakłucia (0,1s-0,5s), jak również opcja regulacji mocy podciśnienia głowicy, pozwalają na maksymalną personalizację zabiegu.



*Możliwość wyłączenia działania radiofrekwencji w głowicy.

Criss RF Matrix PRO

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ JUŻ PO PIERWSZYM ZABIEGU

Zaawansowana technologia

Dzięki **połączeniu radiofrekwencji bipolarnej z mezoterapią mikroigłową**, Criss RF Matrix PRO zapewnia głęboką regenerację skóry i stymuluje jej naturalne procesy odnowy.

Bezpieczeństwo i komfort

Zabiegi są **bezpieczne, efektywne i oferują minimalny czas rekonwalescencji**, co jest cenione przez klientów szukających efektywnych i skutecznych rozwiązań.

Dostosowanie do potrzeb

Dostępne są **kartridże z 25 i 64 igłami, zarówno izolowanymi, jak i nieizolowanymi**, które pozwalają na komfortową pracę na różnorodnych obszarach zabiegowych.

Precyzyjna kontrola

Specjalista może **precyzyjnie regulować długość igieł** od 0,2 mm do 3,5 mm oraz czas nakłucia od 0,1 s do 0,5 s, co pozwala na perfekcyjne dopasowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb.

Korzyści zabiegowe

Korzystając z **CRISS RF Matrix PRO**, możesz zaoferować swoim klientom szeroki wachlarz korzyści zabiegowych, w tym: Redukcja blizn i rozstępów: zmniejszenie widoczności i głębokości blizn oraz rozstępów, co prowadzi do znaczącej poprawy wyglądu skóry.

Ujędrnienie wiotkiej skóry: zwiększenie elastyczności i napięcia, dzięki czemu skóra wygląda na bardziej jędrną. Przebudowa tkanki: pobudzenie naturalnych procesów regeneracji, co wspomaga odnowę i naprawę skóry. Głębokie deponowanie składników aktywnych: efektywne dostarczanie składników odżywczych w głąb skóry, maksymalizujące efekty zabiegów kosmetycznych.



DANE TECHNICZNE

Criss RF Matrix PRO	
Zasilanie Un	230V/50Hz
Prąd In	2A
Moc P	200W
Wymiary Głębokość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H)	L=36cm, B=34cm, H=18cm
Ciężar	8kg
Mobilność	Nie / Możliwość stolika
Rodzaj polaryzacji	Bipolarna
Częstotliwość	1,96MHz
Podciśnienie regulowane	0-2
Prędkość (czas podgrzania tkanki) regulowana	0,1 - 0,5 s
Głębokość wklucia igieł regulowana	0,2 - 3,5mm
Moc RF regulowana	0-20
Tryb pracy	manual / auto

Criss RF Matrix ULTRA

RADIOFREKWENCJA BIPOLARNA I MONOPOLARNA W JEDNYM URZĄDZENIU



Criss RF Matrix ULTRA wykorzystuje synergiczne działanie mikronakłuć i radiofrekwencji, by stymulować naturalne procesy regeneracyjne skóry, co przekłada się na widoczną redukcję blizn, rozstępów i ujędrnienie skóry.

Dodatkowo rozbudowany został o funkcje, tj. masaż podciśnieniowy, zwiększający mikrokrążenie i sprzyjający drenażowi limfatycznemu oraz bezigłowy RF monopolarny, który najlepiej sprawdzi się w modelowaniu sylwetki, widocznym zagęszczeniu skóry, poprawie jej wyglądu w dowolnym obszarze ciała i twarzy. Dzięki temu **Criss RF Matrix ULTRA jest wszechstronnym rozwiązaniem**, które zaspokoi oczekiwania Twoich klientów i wzmocni pozycję Twojego salonu na rynku.


Urządzenie wyposażone jest w głowice do:

1A. Głowica do radiofrekwencji mikroigłowej: Głowica do zabiegu została wykonana z wysokiej jakości tworzywa, co zapewnia jej długą żywotność i trwałość. Jej ergonomiczny kształt sprawia, że użytkownik może ją pewnie i wygodnie trzymać w dłoni. Dostępne kardridże 25 i 64 igłowe z igłami izolowanymi lub nieizolowanymi umożliwiają pracę na różnych obszarach zabiegowych każdemu specjalście.

1B. Głowica do mezoterapii mikroigłowej*: Dzięki zastosowaniu tej samej głowicy umożliwiają tak samo precyzyjne parametry zabiegowe. Regulacje długości igieł (0,2mm-3,5mm) i czasu nakłucia (0,1s-0,5s), jak również opcja regulacji mocy podciśnienia głowicy, pozwalają na maksymalną personalizację zabiegu.

2. Głowica do masażu podciśnieniowego: została wyposażona w obrotowe rolki co ułatwia przesuwanie jej po skórze i zapewnia doskonałe pobudzenie mikrokrążenia. Idealnie sprawdzi się również w drenażu limfatycznym oraz relaksacji mięśni.

3. Głowica do radiofrekwencji monopolarnej: wyposażona w wymienne talerze o różnej średnicy, które umożliwiają precyzyjną pracę na każdym obszarze ciała. Stymulując produkcję kolagenu zapewniającego lifting i ujędrnienie skóry.

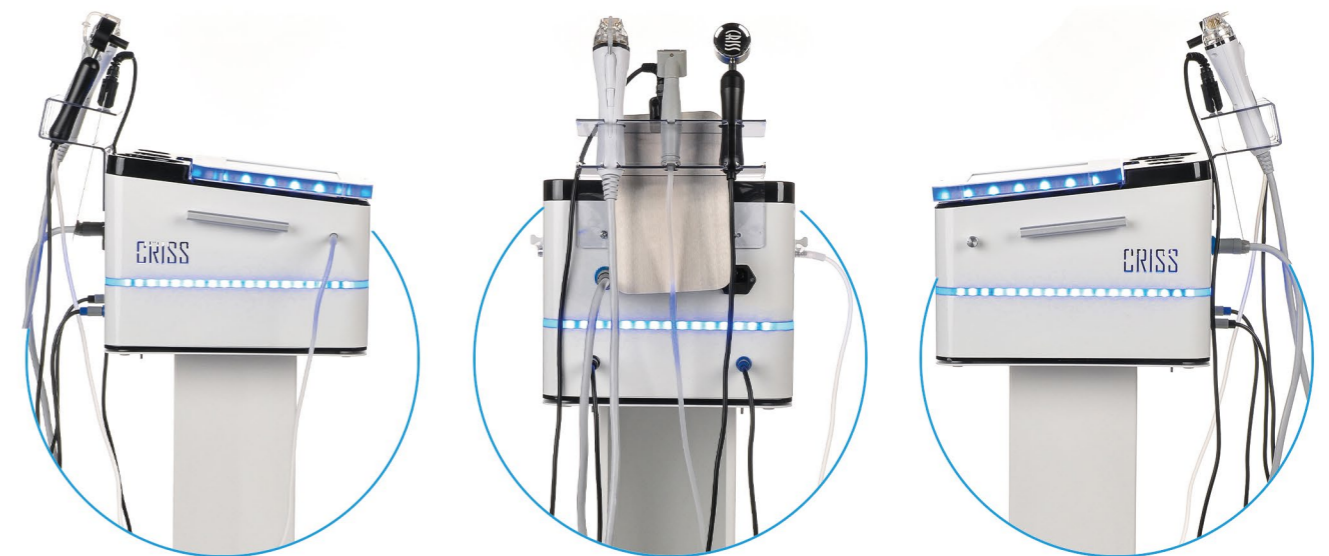

*Możliwość wyłączenia działania radiofrekwencji w głowicy.

Criss RF Matrix ULTRA

WYJĄTKOWE POŁĄCZENIE

W świecie profesjonalnej kosmetologii, gdzie innowacja jest kluczem do sukcesu, **Criss RF Matrix ULTRA** wyróżnia się jako urządzenie, które redefiniuje pojęcie zaawansowanej pielęgnacji skóry. Zaprojektowany z myślą o spełnieniu oczekiwań najbardziej wymagających klientów, Criss RF Matrix ULTRA to synonim przyszłości w estetyce. Zapraszamy do odkrycia, jak to urządzenie może zmienić oblicze Twojego salonu.

Inwestując w Criss RF Matrix ULTRA, otwierasz drzwi do nowych możliwości. To urządzenie pozwala nie tylko na rozszerzenie oferty zabiegów, ale także na wyróżnienie się na tle konkurencji. Wprowadzenie Criss RF Matrix ULTRA do Twojego salonu to krok w kierunku stania się liderem w dziedzinie nowoczesnej kosmetologii.

Trzy wymienne talerze do głowicy radiofrekwencji monopolarnej,

które zwiększają wszechstronność urządzenia i pozwalają na dostosowanie do różnorodnych partii ciała.



Korzyści zabiegowe

Rewitalizacja skóry twarzy: wyspecjalizowane zabiegi odmładzające, które przywracają skórze blask i gładkość.

Modelowanie sylwetki: innowacyjne podejście do kształtowania ciała, redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu, zapewniające wymodelowaną i gładką sylwetkę.

Terapia anti-aging: zaawansowane procedury przeciwstarzeniowe, mające na celu wygładzenie zmarszczek i poprawę ogólnej kondycji skóry.

Odmładzanie dłoni: specjalistyczne zabiegi dedykowane dłoniom, często zaniedbywanej części ciała, które również zasługują na uwagę i pielęgnację.

Okolice oczu: efektywne metody redukcji cieni, worków pod oczami i drobnych linii wokół oczu.

Rozluźnienie mięśni: szczegółowa metoda przynosząca odprężenie napiętej skórze i mięśniom twarzy ograniczając powstawanie zmarszczek.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie Un	230V/50Hz
Prąd In	2A
Moc P	200W
Wymiary Głębokość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H)	L=37cm, B=35cm, H=28cm
Ciężar	13,2kg
Mobilność	Nie / Dedykowany stolik
Rodzaj polaryzacji	Monopolarna / bipolarna
Tryb pracy	manualny / automatyczny
Monopolarny	3 różne głowice
Napięcie głowicy CAP	500-2000V (Vpp)
Moc RF (monopolarny)	3000VA

RADIOFREKWENCJA MONOPOLARNA I BIPOLARNA

	Monopolarna	Bipolarna
Częstotliwość	0,3MHz / 0,5MHz	1,95MHz
Podciśnienie regulowane	Nie dotyczy	0-2
Prędkość (czas podgrzania tkanki) regulowana	Nie dotyczy	0,1-05 s
Głębokość wklucia regulowana	Nie dotyczy	0,2-3,5 mm
Moc RF regulowana	0-10	0-20

Criss Multi

NOWOCZESNY KOMBAJN KOSMETYCZNY



Criss Multi to kwintesencja innowacji, precyzyjnie zaprojektowana dla profesjonalistów chcących zaoferować swoim klientom najnowsze i najskuteczniejsze zabiegi. To multifunkcyjne urządzenie jako jedyne na rynku łączy zabiegi tlenowe, oczyszczanie wodorowe i karboksyterapię.

Criss MULTI otwiera drzwi do nowoczesnej kosmetologii, zapewniając specjalistom narzędzie, które sprosta nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.

Urządzenie wyposażone jest w dysze do:

1A. Oczyszczania wodorowego: zaawansowana metoda oczyszczania skóry, która dzięki wbudowanemu generatorowi wodoru przyczynia się do neutralizacji wolnych rodników, co opóźnia procesy starzenia się skóry oraz daje efekt głębokiego nawilżenia i odżywienia jej komórek.

1B. Abrazji*: metoda opracowania skóry za pomocą podciśnienia i dedykowanego roztworu o różnych właściwościach.

2. Oxybrazji: zabieg złuszczenia naskórka za pomocą strumienia soli fizjologicznej oraz hiperbarycznego tlenu z możliwością regulacji ciśnienia, aż do 8 bar co umożliwi opracowanie każdego typu skóry.

3. Karboksyterapii: bezpieczny zabieg wykorzystujący dwutlenek węgla do poprawy kondycji skóry, stymulujący produkcję kolagenu i elastyny,

4. Infuzji tlenowej: doskonały sposób na dostarczenie skórze czystego tlenu wraz z wybranymi składnikami aktywnymi stymulującymi jej regenerację i odżywienie,

5. Masażu tlenowego: relaksujący zabieg, poprawiający krążenie i odżywiający skórę, sprawiający, że staje się ona bardziej jędrna i promienna.



Aparat wymaga: butli z tlenem sprężonym (hiperbarycznym) oraz butli z medycznym CO₂ do laparoskopii

***1A i 1B:** do wyboru nasadka elastyczna lub z nasypem ściernym

Criss Multi - TWOJE ŹRÓDŁO NATURALNEGO PIĘKNA I MŁODOŚCI

Odkryj pełen zakres korzyści, jakie niesie ze sobą regularne korzystanie z innowacyjnych zabiegów urządzeniem **CRISS MULTI**. Nasza zaawansowana technologia została zaprojektowana, aby sprostać szeregowi wyzwań pielęgnacyjnych, od podstawowych problemów skórnych po bardziej złożone kwestie estetyczne.

Postaw na wszechstronność!

Inwestując w **CRISS MULTI**, otwierasz przed swoimi klientami drzwi do świata wyjątkowej dbałości o urodę i samopoczucie. Nasza filozofia opiera się na kompleksowym podejściu do pielęgnacji ciała i twarzy, co przekłada się na widoczne i trwałe efekty. Dzięki naszym rozwiązaniom, Twój klient nie tylko zauważy znaczącą poprawę w swoim wyglądzie, ale również poczuje się lepiej ze sobą, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie na ich codzienne życie.



Oto co możesz zyskać, decydując się na nasze zabiegi:

- **Dwie metody złuszczenia naskórka** zarówno oxybrazja jak i złuszczająca końcówka w oczyszczaniu wodorowym sprawdzą się w tym idealnie, umożliwiając Ci wykonanie peelingu na każdym rodzaju cery.
- **Neutralizację szkodliwego działania wolnych rodników** przyczyniających się do różnego rodzaju zaburzeń skóry i szybszych procesów starzenia, dzięki wbudowanemu generatorowi wodoru.
- **Różnorodne metody aplikacji i wtłaczania składników aktywnych**, dopasowane do ich form i różnych typów cery za pomocą abrazji, infuzji tlenowej i dyszy do masażu tlenowego.
- **Masaż pobudzający krążenie i dotleniający skórę** wykonywany w wyjątkowy i kojący sposób za pomocą dyszy do masażu tlenowego.
- **Kompleksową pielęgnację głowy**, tj. higienizacja, redukcja objawów łupieżu i łuszczyca, wzmocnienie cebulek włosów, aplikacja składników aktywnych,
- **Zabiegi z minimalną ilością przeciwwskazań** dedykowane również dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- **Jednen z najbardziej uniwersalnych i bezpiecznych zabiegów**, służący do opracowania m.in. okolicy oka, blizn, rozstępów, skóry głowy, cellulitu, nadmiaru tkanki tłuszczowej czy zmarszczek za pomocą dwutlenku węgla.

DANE TECHNICZNE

	Criss Multi
Zasilanie Un	230V/50Hz
Prąd In	2A
Moc P	200W
Wymiary Głębokość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H)	L=38cm, B=35cm, H=121cm
Podstawa	51x51cm
Ciężar	34 kg
Mobilność	Tak
Zasilanie gazem	Tak (O ₂ i CO ₂)
Max. ciśnienie tlenu (wejściowe/wyjściowe)	10bar / 8bar
Max. ciśnienie dwutlenku węgla (wejściowe/wyjściowe)	3bar / 2bar
Generator wodoru	Tak
Min. współczynnik redox	-100mV

Criss Hydro-Oxy

OCZYSZCZANIE WODOROWE I OXYBRAZJA



Główną przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry jest nadmiar wolnych rodników (RFT). Jednym z najskuteczniejszych zabiegów, który przyczynia się do zmniejszenia ilości wolnych rodników, jest oczyszczanie wodorowe. Procedura ta wykorzystuje wodę bogatą w cząsteczki wodoru, co ma na celu neutralizację wolnych rodników. Dzięki temu, cząsteczki wodoru reagują z wolnymi rodnikami, transformując się w wodę i tlen, co sprzyja oczyszczeniu i odmłodzeniu skóry.

Woda wodorowa, o właściwościach alkalicznych, powstaje w procesie elektrolizy w generatorach (jonizatorach) wody wodorowej, wykorzystując do tego prąd elektryczny. Aparat **Criss Hydro-Oxy** umożliwia nie tylko przeprowadzenie zabiegów z wykorzystaniem wody wodorowej, ale również aplikację roztworów z kwasem hialuronowym i witaminą C, co dodatkowo potęguje efekt rewitalizacji skóry.

Urządzenie wyposażone jest w dysze do:

- 1. Oczyszczania wodorowego:** Zaawansowana metoda oczyszczania skóry, umożliwiająca głębokie nawilżenie i odżywienie komórek skóry.
- 2. Oxybrazji:** Delikatny zabieg eksfoliacji, poprawiający teksturę skóry, redukujący zmarszczki i pozostawiający skórę świeżą i promienną.
- 3. Infuzji tlenowej:** Terapia odmładzająca, dostarczająca skórze czysty tlen, stymulująca jej regenerację i odżywienie.
- 4. Masażu tlenowego:** Relaksujący zabieg, poprawiający krążenie i odżywiający skórę, sprawiający, że staje się ona bardziej jędrna i promienna.




Aparat wymaga: butli z tlenem sprężonym O₂ (hiperbarycznym).

Criss Hydro-Oxy

WYTWARZA WODĘ WODOROWĄ W GENERATORZE WODORU PRZED ZABIEGIEM

Criss Hydro-Oxy charakteryzuje się unikalnym rozwiązaniem, polegającym na wytworzeniu wody wodorowej jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu oczyszczania. W procesie elektrolizy woda rozdzielana jest na wodę wodorową i wodę kwaśną a następnie odprowadzana do dwóch oddzielnych pojemników co zapobiega jej ponownemu połączeniu się. Przed zabiegiem możliwe jest kierowana do oddzielnego zbiornika. Ważne jest, aby woda używana do elektrolizy zawierała jony, gdyż woda destylowana i demineralizowana nie nadaje się do tego procesu.

Na rysunku generatora pokazano, że woda wodorowa powstająca w procesie elektrolizy jest dostarczana do specjalnego zbiornika z wodą wodorową, a woda kwaśna jest dostarczana do zbiornika z odpadami.

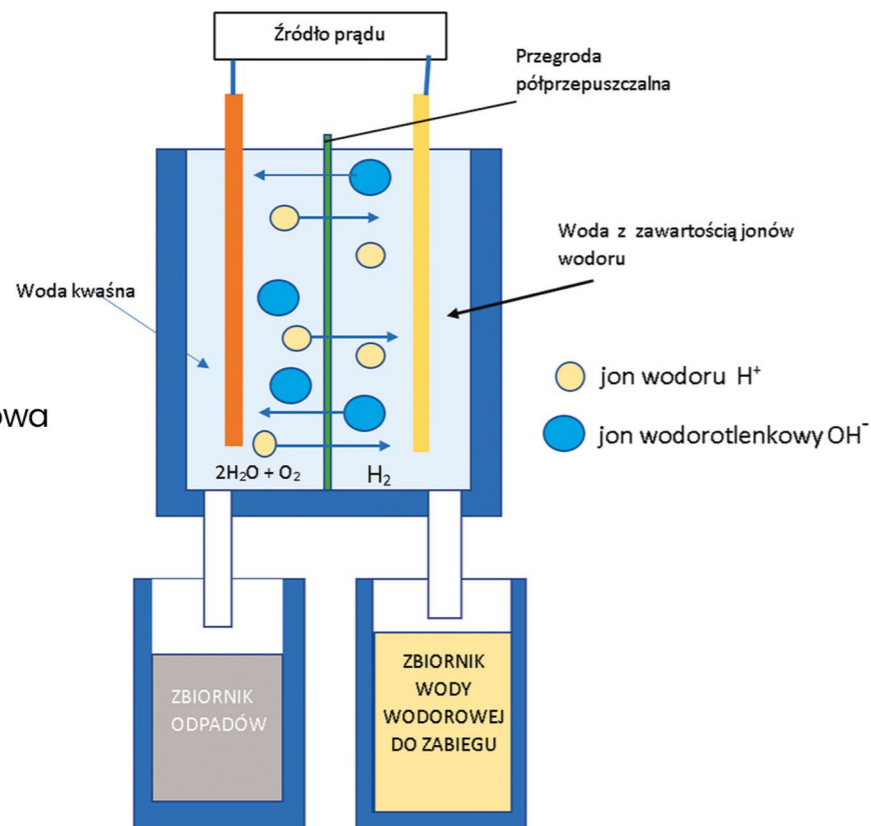

Oto co możesz zyskać, decydując się na nasze zabiegi:

- Delikatne złuszczenie martwych komórek naskórka, co sprzyja odnowie skóry,
- Zmniejszenie nadmiernego rogowacenia, co prowadzi do wygładzenia skóry,
- Redukcja plam pigmentacyjnych i wyrównanie kolorytu skóry,
- Spłycenie drobnych blizn, w tym potrądzikowych, oraz redukcja zmarszczek,
- Zwiększenie efektywności preparatów dzięki lepszemu przenikaniu składników,
- Poprawa elastyczności i nawilżenia skóry, co przekłada się na jej zdrowy wygląd,
- Wzmocnienie naczynek krwionośnych, zmniejszając powstawanie pajęczek,
- Antycellulitowy masaż wspomagający eliminację toksyn
- Mikromasaż pobudzający metabolizm komórkowy, co przyspiesza detoksykację,
- Łagodzenie objawów łuszczycy oraz stabilizacja pracy gruczołów łojowych,
- Redukcja stanów zapalnych skóry, w tym trądziku różowatego,
- Walka z trądzikiem poprzez eliminację bakterii beztlenowych,
- Dotlenienie skóry, co wspiera jej regenerację.



Odkryj moc jonów w naszej wyjątkowej ofercie!

Posiadamy wodę wzbogaconą jonami sodowymi i wodorowęglanowymi. Tak specjalnie przygotowana woda zapewnia jeszcze lepsze rezultaty zabiegów. Idealna kompozycja dla tych, którzy szukają perfekcji w pielęgnacji skóry.

DANE TECHNICZNE

Criss Hydro-Oxy	
Napięcie Un	230V/50Hz
Prąd In	4A
Moc P	200W
Wymiary Głębokość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H)	L=38cm, B=35cm, H=121cm
Podstawa	51x51cm
Ciężar	34 kg
Mobilność	Tak
Zasilanie gazem	Tak (O ₂)
Max. ciśnienie tlenu (wejściowe/wyjściowe)	10bar/8bar
Generator wodoru	Tak
Min. współczynnik redox	-100mV

Criss Carbo-Oxy

DO KARBOKSYTERAPII I ZABIEGÓW TLENOWYCH




Criss Carbo-Oxy to nowoczesny kombajn kosmetyczny, który łączy w sobie najnowsze technologie zabiegów tlenowych i karboksyterapii. Dzięki temu urządzeniu, możesz zaoferować swoim klientom pełen zakres zaawansowanych procedur, w tym oxybrazję, infuzję tlenową, masaż tlenowy oraz karboksyterapię.

Karboksyterapia to jeden z najbardziej wszechstronnych zabiegów w branży beauty, a nasze urządzenie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu. Podczas zabiegu, śródskórnie lub podskórnie podawany jest medyczny CO₂, a **Criss Carbo-Oxy** wykorzystuje innowacyjne technologie, by procedura była jak najbardziej komfortowa i bezpieczna dla Twoich klientów.

Urządzenie wyposażone jest w dysze do:

- 1. Karboksyterapii:** Innowacyjny zabieg wykorzystujący dwutlenek węgla do poprawy kondycji skóry, stymulujący produkcję kolagenu i elastyny.
- 2. Oxybrazji:** Delikatny zabieg eksfoliacji, poprawiający teksturę skóry, redukujący zmarszczki i pozostawiający skórę świeżą i promienną.
- 3. Infuzji tlenowej:** Terapia odmładzająca, dostarczająca skórze czysty tlen, stymulująca jej regenerację i odżywienie.
- 4. Masażu tlenowego:** Relaksujący zabieg, poprawiający krążenie i odżywiający skórę, sprawiający, że staje się ona bardziej jędrna i promienna.

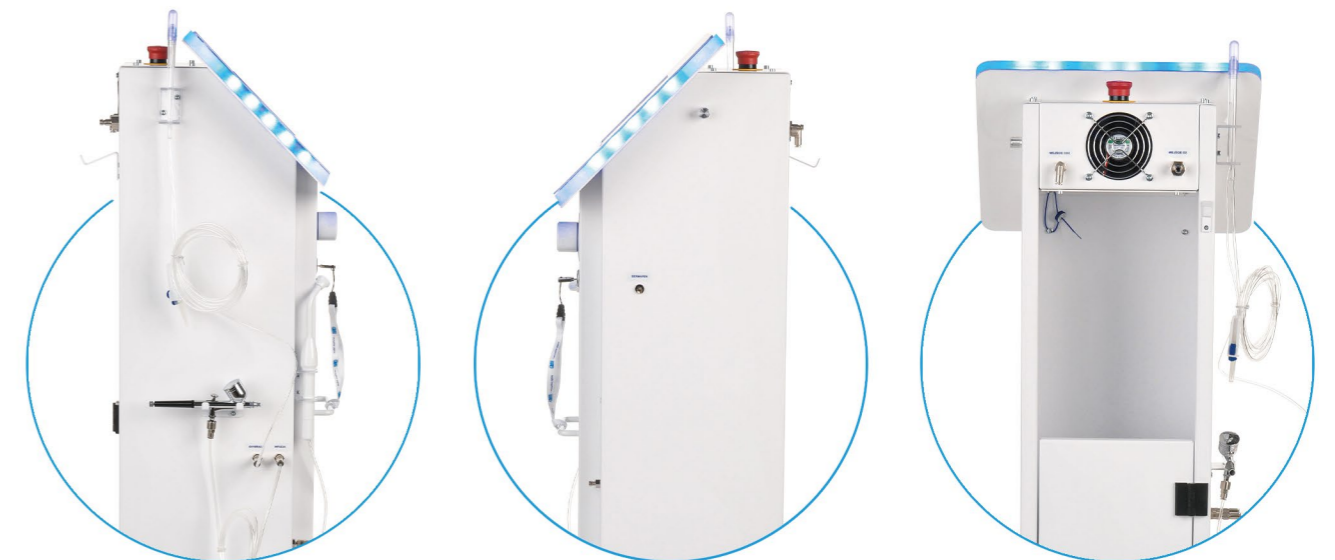

Aparat wymaga: butli z tlenem sprężonym (hiperbarycznym),
oraz butli z medycznym CO₂ do laparoskopii

Criss Carbo-Oxy

POTWIERDZONA SKUTEKZNOŚĆ

Zabiegi realizowane przy użyciu **Criss Carbo-Oxy** oferują szeroki zakres korzyści, w tym: głębokie oczyszczanie twarzy, likwidację cieni i worków pod oczami, peeling skóry twarzy, szyi i dekoltu, redukcję trądziku pospolitego i młodzieńczego, złagodzenie objawów trądziku różowatego, wzmocnienie cebulek włosów, skuteczną likwidację łupieżu oraz objawów łojotokowego zapalenia skóry, redukcję objawów łuszczycy, poprawę owalu twarzy oraz napięcia skóry szyi i ramion, redukcję tkanki tłuszczowej i cellulitu, a także redukcję blizn i rozstępów.

Innowacyjne funkcje

SGF® Stable Gas Flow - Precyzyjna regulacja prędkości przepływu od 10 cc/min do 130 cc/min oraz możliwość ustawienia dawek aplikowanych w trakcie zabiegu. Umożliwia to przeprowadzanie zabiegów z minimalnym dyskomfortem dla pacjenta, co jest kluczowe przy delikatnych obszarach, jak okolice oczu.

AGH® Advanced Gas Heating - Podgrzewanie CO₂ tuż przed aplikacją, co zwiększa komfort zabiegu.

NAC® No-Air Circuit - Automatyczne odpowietrzanie systemu, które jest niezbędne do zachowania ciągłości i bezpieczeństwa terapii.

Kontrola ciśnienia i filtracja - Elektroniczna kontrola ciśnienia i zaawansowane filtry PTFE zapewniają bezpieczeństwo i czystość procedury.

FT® Function Test - Wbudowane oprogramowanie do testowania funkcjonalności aparatu, gwarantujące jego niezawodność.

Dzięki możliwości ustawienia małych dawek i niskiej prędkości przepływu CO₂, **Criss Carbo-Oxy** umożliwia realizację zabiegów praktycznie bezbolesnych. Jest to szczególnie ważne w kontekście zwiększenia satysfakcji i komfortu klientów, co przekłada się na ich chęć do kontynuacji terapii.

Przyjazne oprogramowanie

Aparat Criss Carbo-Oxy wyposażony jest w innowacyjne oprogramowanie, które zostało zaprojektowane tak, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Dzięki temu, urządzenie oferuje dwa tryby pracy: Tryb Inteligentny oraz Tryb Ekspercki, co pozwala na maksymalne dopasowanie parametrów zabiegu do indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki przeprowadzanej procedury.

SGF® Stable Gas Flow PRECYZYJNA REGULACJA PRZEPŁYWU

Aparat CRISS CARBO-OXY został wyposażony w zaawansowaną funkcję precyzyjnej regulacji prędkości przepływu CO₂, która waha się w zakresie od 10 cc/min do 130 cc/min.



Taka precyzja pozwala na dokładne dostosowanie parametrów zabiegu do indywidualnych potrzeb pacjenta, co jest kluczowe dla zapewnienia maksymalnego komfortu oraz efektywności terapii. Dodatkowo, urządzenie oferuje możliwość ustawienia specyficznych dawek CO₂ aplikowanych podczas zabiegu, z opcją wybierania małych dawek już od 0.5 cc.



Jako jedna z nielicznych firm, używamy w naszych urządzeniach do karboksyterapii medycznego, certyfikowanego dwutlenku węgla do laparoskopii, dostępnego w butlach 10l i 5l. Wybór tych pojemności gwarantuje efektywność – butla 10l obsługuje około 7900 zabiegów, a 5l około 3950, zapewniając naszym klientom wygodę i niezawodność.

DANE TECHNICZNE

CRISS Carbo-Oxy

Zasilanie Un	230V/50Hz
Moc zasilania	100W
Wymiary Głębokość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H)	L = 35cm, B = 36cm, H = 122cm
Podstawa	49cm x 49cm
Ciężar	23,5kg
Mobilność	Tak
Zasilanie gazem	Tak (CO ₂ i O ₂)
Max. ciśnienie wejściowe / zabiegu	10bar / 8bar



Criss Hydroxy4

URZĄDZENIE DO ZABIEGÓW TLENOWYCH




Criss Hydroxy4 to zaawansowane, kompaktowe urządzenie stolikowe, zaprojektowane z myślą o profesjonalistach w dziedzinie kosmetologii. Jest to niezbędne narzędzie do przeprowadzenia zabiegów tlenowych takich jak oxybrazja, infuzja tlenowa i masaż tlenowy. Urządzenie łączy się z butlą zawierającą czysty tlen hiperbaryczny, gwarantując nie tylko doskonałe efekty zabiegowe, ale także działanie antybakteryjne i dotleniające.

Co więcej, zabiegi te są bezpieczne i mogą być stosowane przez szerokie spektrum klientów, włączając w to kobiety w ciąży, karmiące oraz osoby z metalowymi implantami w ciele.

Urządzenie wyposażone jest w dysze do:

- 1. Oxybrazji:** zabieg złuszczenia naskórka za pomocą strumienia soli fizjologicznej oraz hiperbarycznego tlenu z możliwością regulacji ciśnienia, aż do 8 bar co umożliwia opracowanie każdego typu skóry.
- 2. Infuzji tlenowej:** doskonały sposób na dostarczenie skórze czystego tlenu wraz z wybranymi składnikami aktywnymi stymulującymi jej regenerację i odżywienie.
- 3. Masażu tlenowego:** relaksujący zabieg, poprawiający krążenie i odżywiający skórę, sprawiający, że staje się ona bardziej jędrna i promienna.

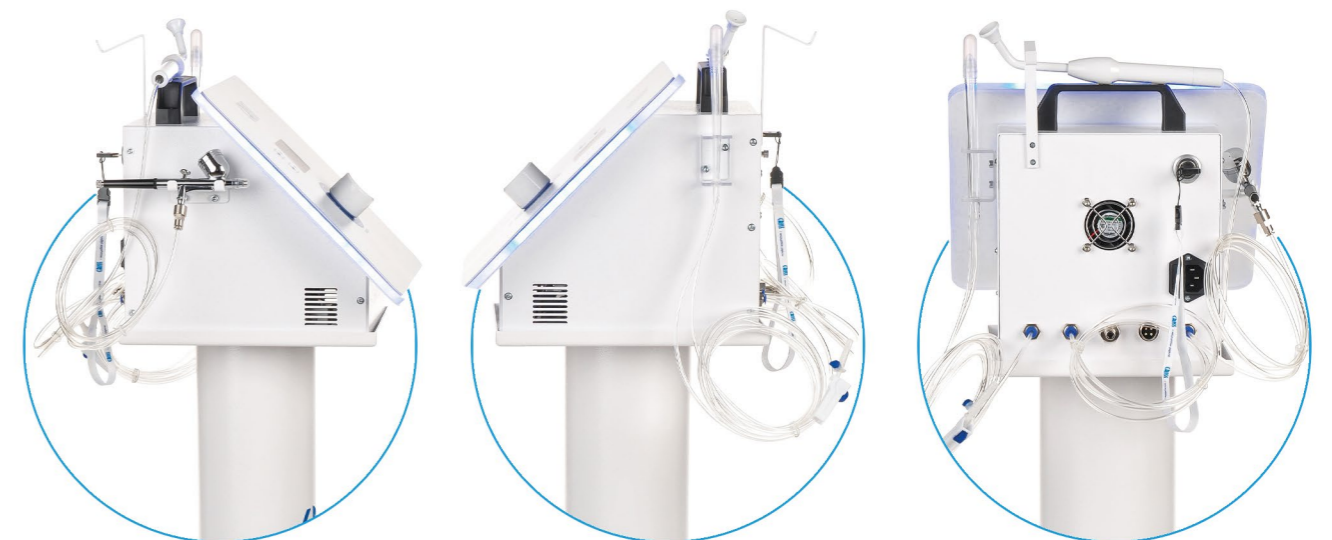

Aparat wymaga: butli z tlenem sprężonym (hiperbarycznym).

Criss Hydroxy4

PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO REWITALIZACJI SKÓRY

Inwestycja w urządzenie Hydroxy4 to nie tylko rozszerzenie oferty o wysokiej klasy zabiegi kosmetyczne, ale również zwiększenie satysfakcji klientów dzięki widocznym efektom już po pierwszych sesjach. Dzięki swojej wielofunkcyjności, urządzenie to jest ekonomicznym wyborem, pozwalającym na zaoferowanie szerokiego wachlarza usług przy użyciu jednego sprzętu. Hydroxy4 stanowi doskonałe połączenie nowoczesnej technologii z łatwością i komfortem użytkowania, co czyni go niezbędnym elementem każdego profesjonalnego salonu kosmetycznego.

Wskazania do zastosowania:

Trądzik i problemy skórne: Zabieg pomaga w redukcji trądziku, zaskórników oraz innych problemów skórnych.

Starzenie się skóry: efektywnie zwalcza oznaki starzenia, takie jak zmarszczki czy utrata elastyczności.

Niedotlenienie skóry: Zabieg znacząco poprawia dotlenienie skóry, co przekłada się na jej zdrowszy wygląd.

Skóra wymagająca regeneracji:
Idealny dla skóry zniszczonej, wymagającej intensywnej odnowy.



Korzyści zabiegowa:

Oksybrazja, znana również jako hydroksybrazja, to innowacyjny zabieg kosmetyczny, który łączy w sobie zalety mikrodermabrazji wodnej z nasyceniem skóry tlenem. Urządzenie **Criss Hydroxy4** to nowoczesne, wielofunkcyjne narzędzie, które umożliwia wykonanie tego zaawansowanego zabiegu w sposób efektywny i komfortowy dla klienta.

Poprawa mikrokrążenia zwiększającego dostarczanie skórze składników odżywczych i tlenu.

Redukcja zaczerwienień i podrażnień skóry, poprzez zwężenie rozszerzonych naczyń krwionośnych.

Poprawa nawilżenia wpływająca na uelastycznienie i zdrowszy wygląd skóry. Zmniejszenie stanów zapalnych istotne w przypadku trądziku jak i innych schorzeń skóry.

Zniwelowanie bakterii beztlenowych odpowiedzialnych za rozwój trądziku.



Zalecana seria zabiegów

Dla osiągnięcia najlepszych efektów zaleca się serię zabiegów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta

DANE TECHNICZNE

	Criss Hydroxy4
Napięcie Un	230V/50Hz
Moc zasilania	2A
Moc P	50W
Wymiary Głębokość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H)	L = 30cm, B = 30cm, H = 28cm
Ciężar	5kg
Mobilność	Nie / Możliwość stolika
Zasilanie gazem	Tak (O ₂)
Max. ciśnienie tlenu (wejściowe/wyjściowe)	10bar /8bar

Criss S-Carbo

DO KARBOKSYTERAPII


Criss S-Carbo to nie tylko urządzenie, to rewolucja w dziedzinie karboksyterapii. Nasza technologia jest rezultatem współpracy inżynierów i kosmetologów, co gwarantuje nie tylko innowacyjność, ale przede wszystkim najlepsze efekty zabiegowe, wysoki komfort pracy i zadowolenie klientów w salonach kosmetycznych.

Karboksyterapia – szerokie spektrum zastosowań

Czym jest karboksyterapia? To terapia, która znalazła szerokie zastosowanie w kosmetologii. Criss S-Carbo wykorzystuje bezpieczny dwutlenek węgla w zabiegach kosmetycznych. Substancja ta jest doskonale tolerowana przez organizm, uczestnicząc w naturalnych procesach fizjologicznych, co czyni ją bezpieczną i skuteczną.

Wszechstronne działanie karboksyterapii

Criss S-Carbo, dzięki swojej wszechstronności, umożliwia kompleksową pielęgnację skóry. Skuteczność tej technologii przejawia się w terapiach antycellulitowych, redukcji zmarszczek, łagodzeniu pękniętych naczynek, zmniejszaniu widoczności blizn, a także w leczeniu łysienia i likwidacji tkanki tłuszczowej.

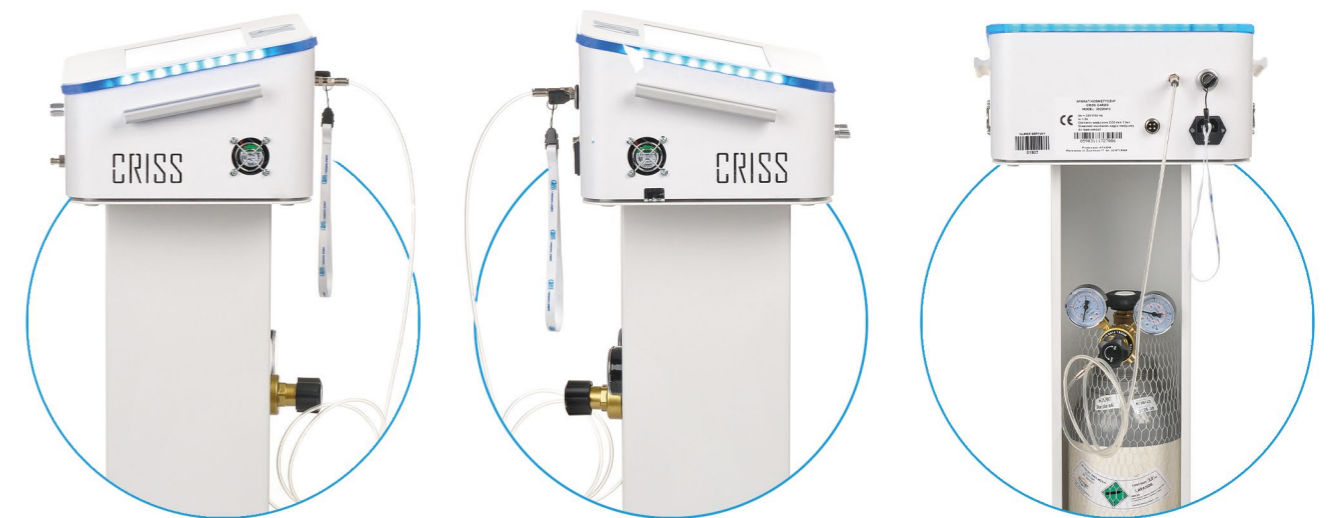

Aparat wymaga: butli z medycznym CO₂ laparoskopowym

Criss S-Carbo

KORZYŚCI ZABIEGOWE

Stymulacja procesów odnowy biologicznej to jedno z najważniejszych osiągnięć Criss S-Carbo. Poprzez aktywację naturalnych mechanizmów regeneracji skóry, urządzenie wspomaga odnowę komórek, przywracając skórze zdrowy i młodzięczy wygląd.

Wpływ na produkcję kolagenu i elastyny to kolejny kluczowy aspekt karboksyterapii z wykorzystaniem Criss S-Carbo. Zabiegi te sprzyjają tworzeniu się kolagenu i elastyny, co skutkuje poprawą elastyczności i jędrności skóry, nadając jej młodzięczy wygląd.

Usprawnienie drenażu limfatycznego to istotny element kompleksowej pielęgnacji. Wspomagając efektywny drenaż limfatyczny, urządzenie redukuje obrzęki oraz poprawia mikrocyrkulację, przyczyniając się do poprawy wyglądu skóry.

Pobudzenie mikrokrążenia to kolejna zaleta karboksyterapii. Działając na mikrokrążenie skóry, zabiegi te przyczyniają się do lepszego zaopatrzenia tkanek w składniki odżywcze, co wspomaga zdrowy i promienny wygląd skóry.

Wywołanie procesu lipolizy to kluczowy efekt terapeutyczny Criss S-Carbo. Zabiegi aktywują proces lipolizy, czyli rozpadu tkanki tłuszczowej, co skutecznie wspomaga redukcję miejscowych złogów tłuszczu, poprawiając kontur ciała.

DANE TECHNICZNE

Criss S-Carbo	
Napięcie Un	230V/50Hz
Moc zasilania	2A
Moc P	100W
Wymiary <small>Głębokość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H)</small>	L=35cm, B=28cm, H=17cm
Ciężar	6kg
Mobilność	Nie / Możliwość stolika
Zasilanie gazem	Tak (CO ₂)
Max. ciśnienie tlenu <small>(wejściowe/wyjściowe)</small>	3bar/2bar



Criss Cool Laser 3F

SKUTECZNA I KOMFORTOWA EPILACJA LASEROWA



Laser do usuwania owłosienia **Criss Cool Laser 3F** jest to Laser emitujący fale o zakresie długości: **755nm (aleksandrytowy)**, **808nm (diodowy)**, **1064nm (neodymowo-yagowy)**. 3 długości fali sprawdzają się idealnie przy różnych fototypach skóry i kolorach włosów.

Oba lasery wyróżniają się przyjaznym, polskim interfejsem, możliwością pracy w programie inteligentnym lub eksperckim. Konstrukcja urządzenia zapewnia bezpieczeństwo, komfort i skuteczność dla użytkowników oraz dla klientów podczas wykonywanych zabiegów.

Głowica lasera

Konstrukcja głowicy pozwala na precyzję i skuteczność podczas wykonywania każdego zabiegu. Umożliwia pracę stemplową lub ciągłą, skracając czas zabiegu na różnych partiach ciała. Oferuje elastyczność w sterowaniu, z opcją wyboru między przyciskiem, a włącznikiem nożnym.

Chłodzenie do -5°C: Nasza głowica wykorzystująca zaawansowaną technologię chłodzenia powietrzem i wodą, osiąga optymalne temperatury, które nie tylko znacząco zwiększają komfort zabiegu, ale także minimalizują ryzyko poparzeń.

Bez żelu, więcej wygody: Nasza głowica nie wymaga użycia żelu, co oznacza szybsze i bardziej komfortowe zabiegi.

Lekka konstrukcja: Można ją trzymać nawet jedną ręką, co gwarantuje łatwe manewrowanie i precyzję, zapewniając doskonale rezultaty nawet w trudno dostępnych miejscach.



Criss Cool Laser

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Obecnie epilacja laserowa to jeden z najpopularniejszych zabiegów usuwania niepożądanego owłosienia. Wykonana odpowiednio dobranym aparatem przez specjalistę jest bezpieczną i skuteczną metodą usuwania zbędnego owłosienia.

Czy epilacja musi boleć?

Technologie stosowane w laserze **Criss Cool Laser** udowadniają, że odpowiedź brzmi: NIE. Dzięki zastosowaniu chłodzenia wodnego oraz metalowego radiatora, który jest kluczowym elementem głowicy, zabieg tym laserem są komfortowe. Ta innowacyjna metoda pozwala na pracę przy wyższych gęstościach energii, co przekłada się na większą efektywność depilacji, jednocześnie zachowując komfort klienta.

Obecnie epilacja laserowa jest jednym z najpopularniejszych zabiegów usuwania niepożądanego owłosienia, a wykonana odpowiednio dobranym aparatem przez specjalistę, jest bezpieczną i skuteczną metodą.




Przyjazne oprogramowanie

CRISS COOL LASER wyposażony jest w przyjazny interfejs w języku polskim. Operator ma możliwość wyboru dwóch wersji oprogramowania:


Program inteligentny

może automatycznie dostosować ustawienia na podstawie kluczowych parametrów, takich jak fototyp skóry, kolor i grubość włosów, co znacząco wpływa na skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu. Ta automatyzacja znacząco skraca czas przygotowania do zabiegu.

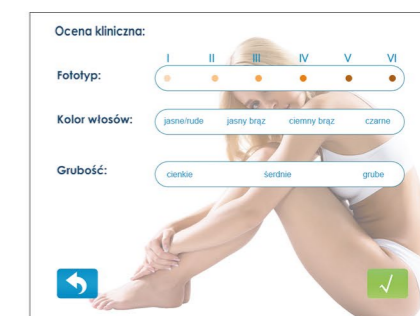

Program ekspercki

to zaawansowana opcja umożliwiająca specjalistom dostosowanie parametrów tj: częstotliwość powtórzeń, czas trwania impulsu, gęstość energii oraz intensywność chłodzenia indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

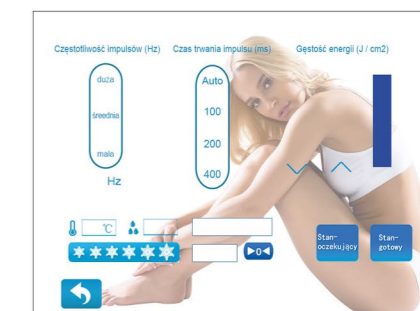

Żywotność głowicy do 25.000.000 impulsów

Przykład, regularne przeprowadzanie codziennego zabiegu epilacji na obszarze klatki piersiowej i brzucha skutkuje rocznym zużyciem około 3300 impulsów dziennie przez 300 dni, co daje w sumie 960 000 impulsów.

DANE TECHNICZNE

CRISS COOL LASER 3F

Długość Fal	755, 808, 1064 nm
Wielkość plamki	14 x 14 mm
Gęstość energii	Do 120 J/cm ²
Czas trwania impulsu	10 - 400 ms
Częstotliwość powtarzania	Do 20 Hz
Zakres chłodzenia głowicy	do - 5°C
Moc	2000 W

Criss Hydro-Balance

HYDRABRAZJA I MASAŻ PODCIŚNIENIOWY W WERSJI KOMPAKTOWEJ

Criss Hydro-Balance to kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne z ekonomicznej linii Criss, łączące dwie zaawansowane technologie: hydrabrazję oraz masaż podciśnieniowy. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu oczyszczania, nawilżenia i ujędrnienia skóry już podczas jednej wizyty. Dzięki wymiennym końcówkom hydrabrazji – gumowej i ściernej – można dostosować intensywność zabiegu do indywidualnych potrzeb skóry klienta. Hydrabrazja zapewnia bezpieczne, nieinwazyjne złuszczenie martwego naskórka z jednoczesnym dostarczaniem składników aktywnych. Masaż podciśnieniowy natomiast działa stymulująco na mikrokrążenie, poprawiając elastyczność i kontur twarzy.

Urządzenie wyposażone jest w głowice do:

1. Hydrabrazja – głowica z końcówką gumową

Delikatna wersja zabiegu przeznaczona dla cer wrażliwych, naczyńiowych lub odwodnionych. Dzięki zastosowaniu miękkiej, elastycznej końcówki możliwe jest skuteczne oczyszczanie i nawilżanie skóry bez ryzyka podrażnień. Idealna do pierwszych zabiegów lub skóry wymagającej łagodnej pielęgnacji.

1. Hydrabrazja – głowica z końcówką ścierną

Intensywniejsza wersja zabiegu dla cer potrzebujących głębszego złuszczenia. Końcówka z nasypem ściernym skutecznie usuwa martwy naskórek, wygładza strukturę skóry i wspiera jej regenerację. Rekomendowana przy skórze zanieczyszczonej, z rozszerzonymi porami i drobnymi zmarszczkami.

2. Głowica do masażu podciśnieniowego:

Zabieg oparty na technologii kontrolowanego podciśnienia, który pobudza mikrokrążenie, redukuje obrzęki i poprawia napięcie skóry. Działa liftingująco i ujędrniająco, wspomaga naturalne procesy regeneracyjne oraz modeluje kontur twarzy. Idealne uzupełnienie zabiegu hydrabrazji.



Criss Hydro-Balance

- SKUTECZNA TECHNOLOGIA DLA KAŻDEJ SKÓRY

Regularne zabiegi z wykorzystaniem **CRISS HYDRO-BALANCE** to klucz do skutecznej, a jednocześnie łagodnej pielęgnacji twarzy. Nasze kompaktowe, a zarazem zaawansowane technologicznie urządzenie powstało z myślą o sprostaniu najczęstszemu wyzwaniu kosmetycznym – od nadmiernej suchości, przez zanieczyszczenia, aż po utratę jędrności i zmarszczki.

Postaw na skuteczną prostotę!

Inwestując w **CRISS HYDRO-BALANCE**, wprowadzasz do swojego gabinetu rozwiązanie, które łączy efektywność dwóch technologii – **hydrabrazji i masażu podciśnieniowego** – w jednym kompaktowym urządzeniu. To narzędzie stworzone do codziennej pracy kosmetyka, zapewniające widoczne rezultaty i wysoki komfort zabiegu dla klienta. Dzięki inteligentnemu podejściu do pielęgnacji, **CRISS HYDRO-BALANCE** nie tylko poprawia wygląd skóry, ale również realnie wpływa na samopoczucie i pewność siebie klientów.



Oto co możesz zyskać, decydując się na nasze zabiegi:

- **Bezpieczne i skuteczne złuszczenie naskórka** – wybierz intensywniejszą końcówkę ścierną lub delikatną gumową, aby precyzyjnie dopasować zabieg do każdego typu cery.
- **Oczyszczenie i zwężenie porów** – działanie podciśnienia oraz płynów aktywnych skutecznie usuwa zanieczyszczenia, sebum i zaskórniki, przywracając skórze świeżość.
- **Intensywne nawilżenie i odżywienie skóry** – dzięki hydrabrazji składniki aktywne przenikają głębiej, poprawiając elastyczność, napięcie i promienność skóry.
- **Lifting i modelowanie owalu twarzy** – masaż podciśnieniowy pobudza mikrokrążenie i stymuluje produkcję kolagenu oraz elastyny.
- **Widoczne wygładzenie zmarszczek i drobnych nierówności** – zabieg poprawia strukturę skóry i nadaje jej młodszy, bardziej wypoczęty wygląd.
- **Efektywne działanie również na cerę wrażliwą i naczyniową** – możliwość regulacji ciśnienia i zastosowania łagodnych preparatów czyni zabieg wyjątkowo uniwersalnym.
- **Przygotowanie do dalszych procedur kosmetycznych** – oczyszczona, nawilżona i dotleniona skóra lepiej chłonie składniki z ampułek, masek czy serum.

DANE TECHNICZNE

Criss Hydro-Balance	
Napięcie Un	230V/50Hz
Prąd In	4A
Moc P	100W
Wymiary Głębokość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H)	L=22cm, B=26cm, H=30cm
Ciężar	8 kg
Stopień podciśnienia	-80KPa
Płynna regulacja podciśnienia	0 ~ - 0,8bar
Możliwość stosowania płynnych kosmetyków	Tak
Płynna regulacja dozowania preparatów	Tak
Masaż limfatyczny (podciśnieniowy)	Tak
Pojemność butelki na kosmetyk	300ml
Pojemność butelki na odpady	500ml

Criss PressEMS 3w1

urządzenie do presoterapii,
elektrostymulacji EMS i terapii
podczerwienią IR

Kompleksowa terapia ciała – od skóry po mięśnie

Profesjonalne urządzenie łączące trzy technologie w jednym, stworzone z myślą o kosmetologii, wellness i rehabilitacji.



Criss PressEMS 3w1 to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie trzy zaawansowane metody terapeutyczne w jednym, kompaktowym systemie. Dzięki temu każdy gabinet kosmetyczny, SPA czy centrum rehabilitacji zyskuje dostęp do technologii, które dotychczas wymagały kilku osobnych aparatów.

Presoterapia (drenaż limfatyczny) – stymuluje naturalny przepływ krwi i limfy, odciąża organizm, usuwa nadmiar płynów i toksyn, redukuje obrzęki oraz wspomaga walkę z cellulitem.

Elektrostymulacja EMS – aktywuje włókna mięśniowe, wzmacnia i ujędrnia mięśnie, poprawia napięcie skóry, wspiera modelowanie sylwetki oraz przyspiesza regenerację po wysiłku i urazach.

Podczerwień IR – przenika w głąb tkanek, pobudzając syntezę kolagenu i elastyny, poprawia mikrokrążenie, wspiera procesy lipolizy oraz działa przeciwzapalnie i ujędrniająco.

Synergia tych technologii sprawia, że Criss PressEMS 3w1 oferuje kompleksową pracę z ciałem pacjenta – od poprawy krążenia i detoksykacji, przez modelowanie sylwetki i redukcję cellulitu, aż po wsparcie w rehabilitacji, rekonwalescencji i odnowie biologicznej.

Urządzenie wyposażone jest w:

- **7-częściowy kombinezon do presoterapii i podczerwieni (IR)** (nakładki na stopy, nogawki lewe i prawe, pas brzuszny oraz rękawy),
- **8 par elektrod do EMS**
- oraz komplet przewodów i akcesoriów podłączeniowych, co zapewnia pełną funkcjonalność od pierwszego dnia pracy.



Criss PressEMS

SYNERGIA TECHNOLOGII W REHABILITACJI

Criss PressEMS 3w1 to urządzenie, które integruje trzy sprawdzone metody terapeutyczne – **presoterapię, elektrostymulację mięśniową (EMS)** i **podczerwień IR** – tworząc kompleksowe narzędzie wspierające proces rehabilitacji i odnowy biologicznej.

Presoterapia usprawnia krążenie żyłne i limfatyczne, zmniejsza obrzęki pourazowe i pooperacyjne oraz przyspiesza procesy gojenia. **EMS pozwala na** aktywację i wzmocnienie mięśni, przeciwdziała zanikom wynikającym z unieruchomienia i wspiera reedukację nerwowo-mięśniową, a **podczerwień IR poprawia** mikrokrążenie, działa przeciwzapalnie, łagodzi ból i stymuluje procesy regeneracyjne.

Synergia tych trzech technologii umożliwia jednoczesne działanie na układ krążenia, mięśnie i tkanki, co przekłada się na szybszą rekonwalescencję, redukcję obrzęków i napięć mięśniowych oraz poprawę jakości życia pacjentów – od sportowców po osoby w trakcie terapii pourazowej czy pooperacyjnej.

Presoterapia – skuteczny drenaż limfatyczny i wsparcie terapeutyczne

Presoterapia, zwana również drenażem limfatycznym, to zaawansowana metoda terapeutyczna oparta na sekwencyjnym ucisku tkanek za pomocą pneumatycznego kombinezonu. W urządzeniu **Criss PressEMS 3w1 wykorzystano system 24 niezależnych komór powietrznych**, które obejmują stopy, nogi, brzuch i ramiona, umożliwiając precyzyjne i kompleksowe działanie na cały organizm.

Główne korzyści terapeutyczne:

- redukcja obrzęków limfatycznych, pourazowych i pooperacyjnych,
- poprawa krążenia żylnego i limfatycznego,
- profilaktyka zakrzepicy i zespołu ciężkich nóg,
- przyspieszenie procesów gojenia i rekonwalescencji,
- zmniejszenie napięć oraz bólów mięśniowych,
- wsparcie regeneracji powysiłkowej u sportowców i osób aktywnych.


Korzyści estetyczne:

- redukcja cellulitu (zwłaszcza typu wodnego),
- modelowanie i wyszczuplanie sylwetki,
- detoksykacja organizmu i eliminacja produktów przemiany materii,
- ujędrnienie skóry po odchudzaniu lub ciąży,
- poprawa trofiki tkanek i ogólnej kondycji skóry.

Presoterapia w Criss PressEMS 3w1 łączy funkcję terapeutyczną i estetyczną, czyniąc zabieg niezastąpionym w kosmetologii, wellness i rehabilitacji.



8 programów pracy
pozwalają dopasować terapię
do indywidualnych potrzeb klineta.

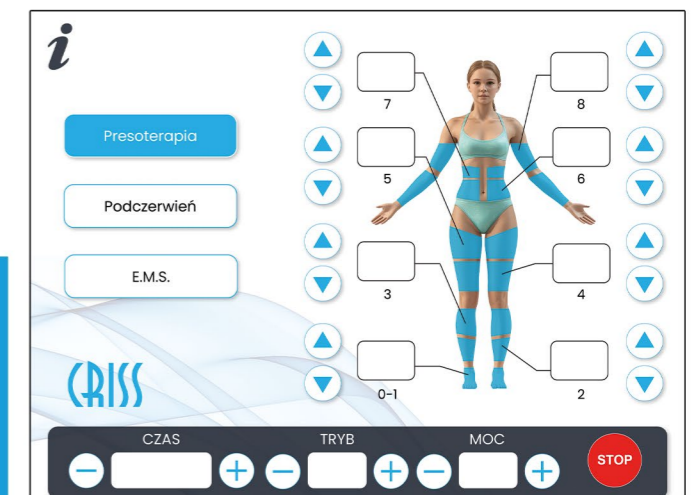

Podczerwień IR – głębokie działanie termiczne i regeneracyjne

W urządzeniu **Criss PressEMS 3w1** technologia podczerwieni została **zintegrowana bezpośrednio w tym samym kombinezonie**, który wykorzystywany jest do presoterapii. W specjalnych komorach pneumatycznych umieszczono elementy grzewcze IR, które w **zakresie 35–65°C oddziałują na tkanki nawet do 3 cm w głąb**.

Korzyści terapeutyczne:

- poprawa mikrokrążenia i dotlenienia tkanek,
- redukcja obrzęków i stanów zapalnych,
- łagodzenie bólu mięśniowego i stawowego,
- wsparcie regeneracji po urazach i zabiegach,
- przyspieszenie procesów gojenia i odnowy biologicznej.

Korzyści estetyczne:

- stymulacja fibroblastów i produkcji kolagenu,
- ujędrnienie i poprawa elastyczności skóry,
- redukcja cellulitu i lokalnej tkanki tłuszczowej,
- wspomaganie lipolizy i modelowania sylwetki,
- efekt wygładzenia i poprawy struktury skóry.



Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość jednoczesnego działania presoterapii i podczerwieni – klient w jednym zabiegu zyskuje efekt drenażu limfatycznego oraz intensywne działanie termiczne wspierające metabolizm i regenerację.

Elektrostymulacja EMS – aktywacja i wzmocnienie mięśni


Criss PressEMS 3w1 wyposażony jest w 8 par elektrod, które generują impulsy elektryczne wywołujące skurcz mięśni, imitując naturalną aktywność fizyczną. Dzięki temu zabieg stanowi skuteczne wsparcie zarówno w kosmetyce sylwetkowej, jak i w procesach rehabilitacyjnych.

Korzyści terapeutyczne:

- odbudowa siły mięśniowej u pacjentów po urazach i w trakcie rekonwalescencji,
- reedukacja nerwowo-mięśniowa i poprawa przewodnictwa,
- zmniejszenie zaniku mięśniowego w wyniku unieruchomienia,
- poprawa krążenia w tkankach mięśniowych,
- redukcja bólu i napięcia mięśniowego.

Korzyści estetyczne:

- poprawa napięcia i tonusu mięśni,
- wysmuklenie i modelowanie sylwetki (brzuch, uda, pośladki, ramiona),
- redukcja cellulitu poprzez aktywizację mięśni głębokich,
- ujędrnianie skóry i efekt liftingu tkanek,
- wsparcie detoksykacji organizmu w połączeniu z presoterapią.

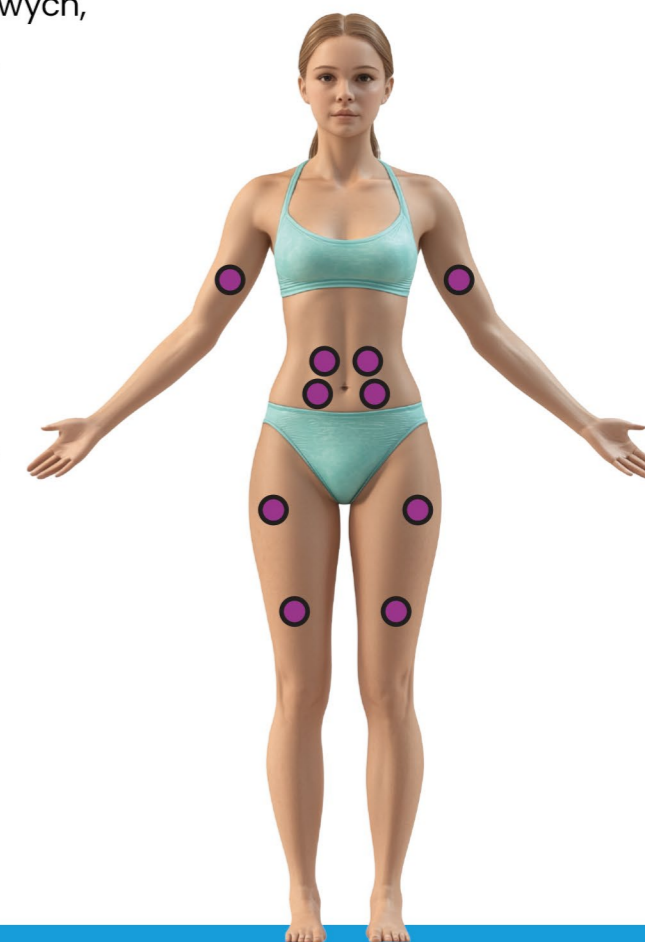

EMS w Criss PressEMS oferuje 4 tryby pracy: od delikatnej stymulacji drenażowej, przez tonizację, po intensywną aktywację włókien mięśniowych i trening izometryczny. Dzięki temu zabieg można dostosować do indywidualnych potrzeb, od regeneracji po wysiłku, po kompleksowe modelowanie sylwetki.

Criss PressEMS 3w1

TWOJA PRZEWAŻĘ W BIZNESIE

Inwestując w Criss PressEMS 3w1, zyskujesz nie tylko urządzenie, ale też realne wsparcie w rozwoju gabinetu.

- Szybki zwrot inwestycji – możliwość pracy na dwóch klientach jednocześnie i szerokie zastosowanie zabiegów zwiększają przychody od pierwszego dnia.
- Uniwersalne zastosowanie – technologia sprawdza się zarówno w kosmetologii estetycznej, jak i w fizjoterapii czy wellness.
- Wsparcie producenta – szkolenie, materiały marketingowe i pełna opieka serwisowa.
- Prestiż i nowoczesny wizerunek – gabinet wyposażony w urządzenie 3w1 wyróżnia się na tle konkurencji i przyciąga nowych klientów.

Criss PressEMS 3w1 to więcej niż urządzenie – to partner w rozwoju Twojego gabinetu

Criss PressEMS 3w1 umożliwia jednoczesną pracę na dwóch osobach – jeden klient może korzystać z elektrostymulacji EMS, a drugi w tym samym czasie z presoterapii i podczerwieni IR. To zwiększa efektywność pracy gabinetu i pozwala szybciej zwrócić inwestycję w urządzenie.



Parametry techniczne Criss PressEMS

Criss PressEMS 3w1 to kompaktowe urządzenie łączące trzy zaawansowane technologie w jednym systemie. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanym parametrom technicznym zapewnia niezawodność, bezpieczeństwo i wysoką skuteczność zabiegów, a jego ergonomiczna budowa gwarantuje komfort pracy w każdym gabinecie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe	230V / 50Hz
Moc	350
Funkcje urządzenia	Presoterapia, Elektrostymulacja, Podczerwień
Kombinezon Presoterapii	7 częściowy kombinezon: but lewy/prawy, nogawka lewa/prawa, pas na brzuch, rękaw lewy/prawy
Sterowanie Presoterapią	8 programów z możliwością zastosowania na poszczególne partie ciała
Ilość komór w kombinezonie	24
Siła Presoterapii	20-40 kPa / 25-40 l/min
Czas trwania presoterapii	0-15s
Sterowanie Podczerwieni (IR)	7 części niezależnie sterowanych
Temperatura Podczerwieni (IR)	35-65°C
Sterowanie EMS	8 par elektrod sterowanych indywidualnie
Mikroprąd EMS	40mA
Sterowanie	10-calowy dotykowy ekran
Waga	11kg
Wymiary	36x34x20cm

Criss
SZKOLENIA



Szkolenia

Centrum Szkoleniowe Criss



Dołącz do elity w Centrum Szkoleniowym CRISS! Od 2006 roku, z niezachwianym zaangażowaniem, kształcimy specjalistów z branży kosmetycznej, zdobywając zaufanie i uznanie na polskim rynku. Nasze szkolenia, prowadzone przez doświadczonych kosmetyków, stanowią połączenie teorii z praktyką, gwarantując uczestnikom solidne przygotowanie do wykonywania zabiegów.

Szkolenia Criss z nowym standardem SUS 2.0

Informujemy, że firma Criss niedawno uzyskała certyfikat Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych (SUS) 2.0, który jest świadectwem najwyższej jakości naszych szkoleń zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym.

Ten prestiżowy certyfikat potwierdza nasze zaangażowanie w oferowanie szkoleń, które spełniają surowe kryteria branżowe. Uzyskanie certyfikatu SUS 2.0 to dla nas nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie do dalszego rozwijania i doskonalenia naszych szkoleń.

Doskonal swoje umiejętności z nami

WYBIERZ IDEALNIE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB



Szkolenia Produktowe

Z URZĄDZEŃ CRISS

Szkolenia produktowe Criss to brama do świata profesjonalizmu w kosmetologii, gdzie jakość, innowacja i głęboka wiedza specjalistyczna łączą się, by zapewnić najwyższy standard edukacyjny. Starannie opracowane programy naszych szkoleń skupiają się nie tylko na teorii, ale przede wszystkim na praktycznych umiejętnościach niezbędnych do efektywnego wykorzystania naszych zaawansowanych urządzeń kosmetycznych.

Szkolenia otwarte

ZAINWESTUJ W SIEBIE

Nasze programy szkoleniowe zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić Ci najnowszą, praktyczną wiedzę. Każdy uczestnik, bez względu na stopień zaawansowania, znajdzie coś cennego dla siebie. W ramach naszej oferty edukacyjnej przedstawiamy m.in.: Kursy z oczyszczania wodorowego oraz abrazji; Zaawansowane szkolenia z karboksyterapii; Warsztaty z technik tlenowych; Szkolenia z mezoterapii mikroigłowej frakcyjnej z radiofrekwencją i kursy z epilacji laserowej.



Szkolenia posprzedażowe

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Oferujemy bezpłatne szkolenia posprzedażowe, które uczynią Ciebie i Twój zespół ekspertami w ich obsłudze. Z każdym zakupem naszego urządzenia, zapewniamy kompleksową wiedzę i wsparcie od doświadczonych kosmetyków. Nie musisz martwić się o logistykę – przyjeżdżamy do Ciebie z niezbędnymi narzędziami do szkolenia, lub zapraszamy do naszej siedziby w Sulejówku.



Aycom Niewójt sp.j.

ul. Witwickiego 10
03-980 Warszawa
NIP 1132957853

Biuro, Centrum szkoleniowe, magazyn:

ul. Rzemieślnicza 9
05-070 Sulejówek
e-mail: marketing@criss.pl

Obsługa klienta

- +48 22 777 40 45
- marketing@criss.pl
- [m.me/AYCOM.CRISS](https://www.instagram.com/m.me/AYCOM.CRISS)
- Pn.-Pt. 8:00 - 16:00

Obsługa klienta po godzinach pracy

- +48 600 249 800

Serwis po godzinach pracy

- +48 796 666 069

www.criss.pl

